


SYNERGY

BONE GRAFTING MATERIALS

KIT DE ENSANCHAMIENTO OSEO

3 ensanchadores
mecánicos con
adaptadores
roscables

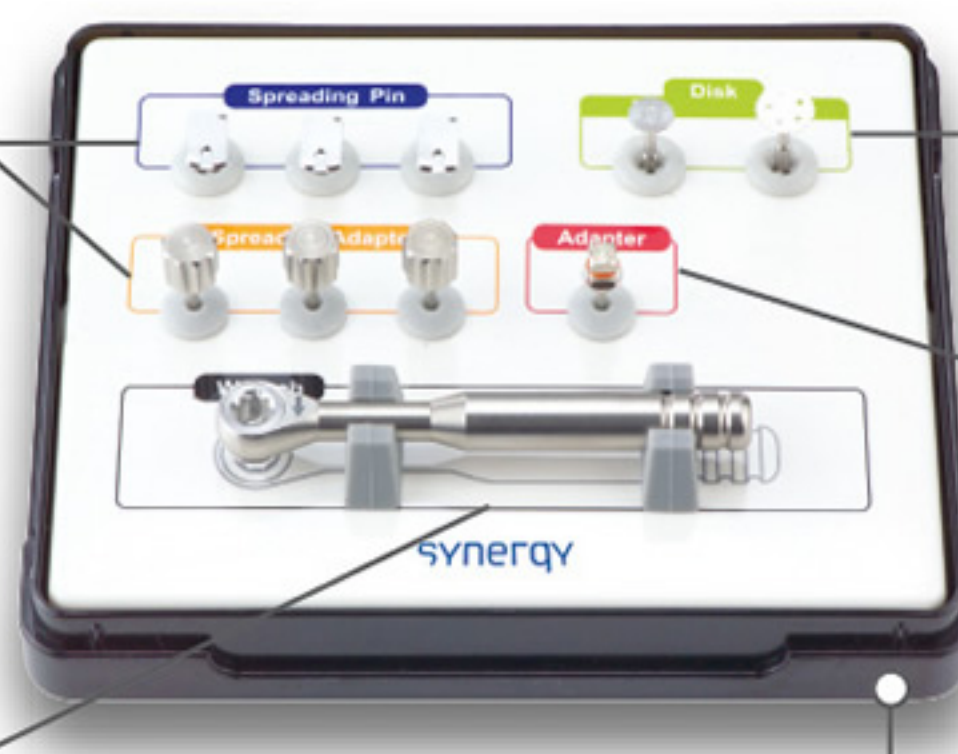

2 discos de corte
de 7,0 y 9,0 mm.
para contraángulo

1 destornillador
hexagonal para
llave criquet

1 llave criquet con
cuadrado de 4 x 4 mm.

Caja organizadora autoclavable
Medidas: 5 x 14 x 11 cm.)

GUIA DE UTILIZACION



1
Corte longitudinal de
la tabla ósea



2
Corte transversal en
extremos



3
Inserción de
ensanchadores



4
Apertura por
roscado



5
Relleno de la cavidad
lograda

SYNERGY

BONE GRAFTING
MATERIALS



www.synergybiomedical.eu

Tel.: (011) 4825-0221 / synergy@odontit.com